

GETINGE K-SERIE BÄNKAUTOKLAVER



Always with you

HIGH-SPEED STERILIZATION™


ÖVERLÄGSEN KAPACITET OCH EFFEKTIVITET



Getinge K-serie är en serie exceptionellt snabba bänkaulkaver. Faktum är att kapaciteten är så stor att en enda autoklav klarar jobbet för två!

På bara 25 minuter steriliserar de upp till 10 brickor i ett B-processprogram. Det blir hela 20 brickor i timmen. Och nöjer du dig med ett snabbprogram för oförpackade, solida instrument, är det klart på bara 9 minuter. Resultatet blir att instrumenten snabbt är klara att användas igen. Mängden instrument på kliniken kan därmed minskas kraftigt.

Getinge K-serie har rektangulära kammare där nästan 100% av volymen utnyttjas vid sterilisering av brickor och kassetter. I en rund kammare utnyttjas 25% av volymen inte alls. Kammarformen avgör lastkapaciteten, så räkna brickor, inte liter!

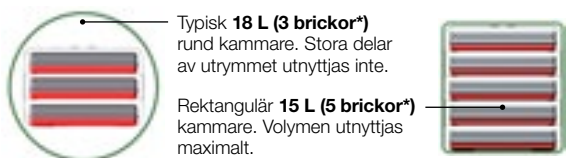

Upp till 10 års garanti

Efter att ha tillverkat bänkaulkaver i över 50 år, vet vi vad våra maskiner går för. Därför vågar Getinge också ge dig en garanti som höjer sig över mängden. Eller vad sägs om två års garanti på utrustningen som helhet, fem år på pumpen i vakuum-systemet, samt tio år på kammaren och elementen i ånggeneratorn.



Väl beprövad B-process

EN 13060 (från sept 2004) är den europeiska normen för små autoklaver. En del av denna norm definierar vacuum B-process-sterilisation av förpackade, hålförmiga instrument och textilier. Getinges K-serie har haft B-process sedan 1989.

Säker skjutdörr

Visste du att trycket på en autoklavadörr är hela ett ton? På en konventionell dörr ska endast gångjärn och låsmekanismen kunna motstå hela kraften. Getinges K-serie är däremot konstruerad med en skjutdörr som löper i kraftiga skenor. En klart säkrare lösning.

Skjutdörrens konstruktion skyddar även användaren från dörrens heta insida. Dessutom inkräktar den inte på det ofta begränsade utrymmet framför autoklaven.

Enkel att sköta och använda

Även användarvänlighet och enkelt underhåll är områden som prioriteras i Getinges K-serie:

- Enkel att använda; bara lasta, stäng dörren och tryck på "start".
- Enkelt och billigt underhåll tack vare en unik konstruktion med få komponenter.
- Lättåtkomlig vattentank av rostfritt stål som är enkel att rengöra. Detta förhindrar uppkomsten av ohygienisk biofilm.
- Låg förbrukning av avjoniserat vatten, endast ca 0,4 liter under en normal process.
- Möjlighet till extern vattenanslutning.
- Processdokumentation är möjlig via skrivare, USB eller PC-anslutning.

En modell för varje behov

Getinge K-serie innehåller tre modeller, med olika kammardjup och lastkapacitet. Det gör att varje praktik eller klinik kan finna en storlek som passar den egna verksamheten.

* Bricka eller dentalkassett, 38 mm hög.

GETINGE K5+/K7+ AUTOKLAVER

UPP TILL 20 BRICKOR & 20 MINIBRICKOR I TIMMEN

Standardprogram på 25 minuter

Standardprogrammet (B-process) tar endast 25 minuter.

Specialprogram på 15 minuter

Dental Special programmet (S-process) för max. 10 förpackade dentala hand- och vinkelstycken tar bara 15 minuter.

Snabbprogram på 9 minuter

Snabbprogrammet (N-process) för oförpackade solida instrument tar endast 9 minuter.

Överlägsen kapacitet & produktivitet

Den rektangulära kammaren i Getinge K5+/K7+ utnyttjas optimalt för maximal lastkapacitet och passar såväl dentalbrickor, kassetter och galler. Inom loppet av en timme kan du sterilisera upp till 20 instrumentbrickor med K5+ och därutöver ytterligare 20 minibrickor med den 100 mm djupare K7+!

Den höga produktiviteten gör att endast en autoklav kan klara jobbet för två! Snabbheten innebär att instrumenten snabbt kan användas igen. Färre instrument behövs, vilket betyder minskade investeringskostnader. Hög produktivitet har blivit ökad lönsamhet!

För större kliniker

Både Getinge K5+ och K7+ är idealiska för praktiker/kliniker med hög omsättning av sterilt gods.


Det ökade kammardjupet i Getinge K7+, gör den även lämplig för verksamheter som kräver sterilisation av längre instrument, t ex endoskop eller specialbeskickningar för exempelvis implantat.



K5+ och K7+ finns i två versioner, antingen rostfritt eller vitt utförande.


På en timme steriliserar Getinge K5+:

20 brickor

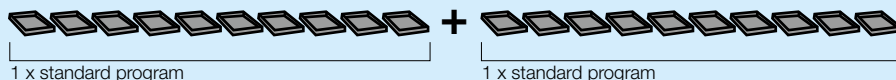

På en timme steriliserar Getinge K7+:

20 brickor + 20 minibrickor

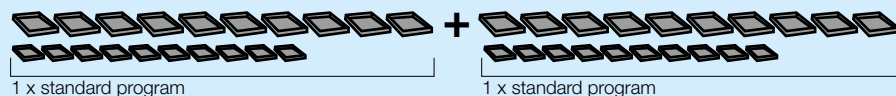

GETINGE K3+ AUTOKLAV

UPP TILL 12 BRICKOR I TIMMEN

Standardprogram på 25 minuter

Standardprogrammet (B-process) tar endast 25 minuter.

Specialprogram på 15 minuter

Dental Special programmet (S-process) för max. 10 förpackade dentala hand- och vinkelstycken tar bara 15 minuter.

Snabbprogram på 9 minuter

Snabbprogrammet (N-process) för oförpackade solida instrument tar endast 9 minuter.

Överlägsen kapacitet & produktivitet

Den rektangulära kammaren i Getinge K3+ utnyttjas optimalt för maximal lastkapacitet och passar såväl dentalbrickor, kassetter och galler. Inom loppet av en timme kan du sterilisera upp till 12 instrumentbrickor.

Getinge K3+ har högre produktivitet jämfört med andra konventionella autoklaver i samma storleksklass. Snabbheten innebär att instrumenten snabbt kan användas igen. Färre instrument behövs, vilket betyder minskade investeringskostnader. Hög produktivitet har blivit ökad lönsamhet!

För mindre kliniker

Getinges K3+ autoklaver är idealiska för praktiker/kliniker med normal omsättning av sterilt gods och med behov av mycket snabba processer.

Kammardjupet är detsamma som på Getinges K5+ autoklaver, men höjden – och därmed även lastkapaciteten – är något mindre.



K3+ finns i två versioner, antingen rostfritt eller vitt utförande.



Getinge K3+
djup: 345 mm




Getinge K5+
djup: 345 mm



Getinge K7+
djup: 445 mm

På en timme steriliserar Getinge K3+:

12 st brickor

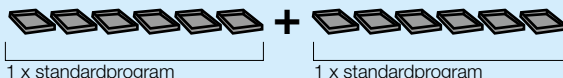


TEKNISKA DATA

GETINGE K-SERIE		
Standardprogram		
Processtyp	Program	Processtid
B-process	134°C Förpackat	~25 min
B-process	121°C Förpackat	~39 min
B-process	134°C Textil	~29 min
B-process	134°C Prion	~38 min
S-process	134°C Dental Special*	~15 min
N-process	134°C Snabbprogram	~9 min
Testprogram: Bowie & Dick, Läcktest		

* För upp till 10 st. förpackade dentala hand- och vinkelstycken.

Tillval		
Vätskeprocess	121°C Vätska	~90 min
Kundspecifik process	121°C - 134°C	

Tidsangivelserna är ungefärliga och avser full process inklusive torkning vid normalbeskickad autoklav. För mer information, se produktspecifikation.

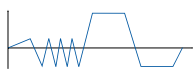

B-process (schematisk)



N-process (schematisk)



S-process (Dental Special)

EI


1-fas, 230 V, 10 Amp.

Ljudnivå

<60 dB

Validering

Autoklaven är förberedd med anslutningar för separata, externa temperatur- och tryckgivare, för validering enl tex EN554 och ISO17665.

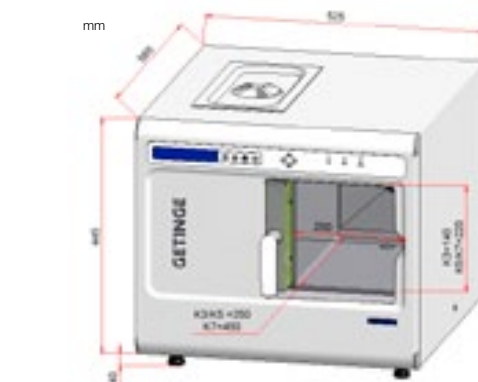

Kammarvolym/Max. last (textil)

K3+ = 10 liter / 3 kg (1,5 kg)

K5+ = 15 liter / 5 kg (2,5 kg)

K7+ = 20 liter / 7 kg (3,5 kg)

Vattenanslutning/-krav

Erforderlig vattenkvalitet: destillerat eller avjoniserat max. 30 µS/cm

Vattenförbrukning: ca. 0,4 l/cykel

Tankvolym: 5 l

Erforderligt tryck: minimum 1,0 bar vid vattenanslutning

Avjoniseringsfilter DS200

Kapacitet vid 200 ppm cirka 520 l.


Monteras på väggen.

Processdokumentation

Sker via separat skrivare, USB eller med hjälp av PC-anslutning.



TILLBEHÖR

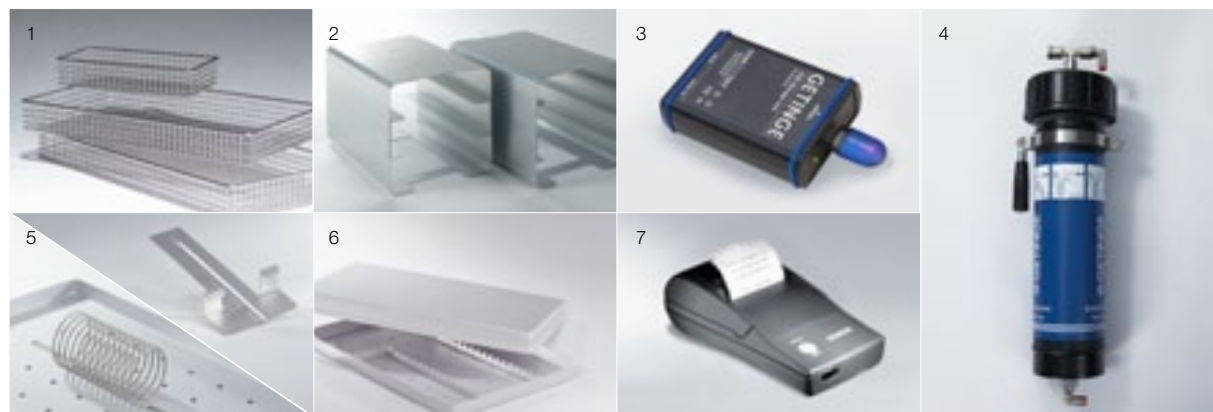

Ett urval av tillbehör till Getinges K-serie

1. Galler, 380 x190x38 mm, 330x190x38 mm eller 100 x190x38 mm
2. Variation av anpassade insatser
3. USB storage unit
4. Avjoniseringsapparat DS200 för anslutning till vatten och avlopp
5. Ställ för påsar (underlättar torkning av gods) / Brickhandtag

6. Dentalkassett, komplett med lock och insats, 287x186x39 mm

7. Skrivare

Det finns ytterligare en mängd tillbehör till Getinge K-serie, se separat blad. Gå in på www.skarhamn.getinge.com eller vänd dig till din Getinge leverantör.



KOMPLETTA LÖSNINGAR FÖR INFEKTIONSKONTROLL

Getinge är världens ledande leverantör av lösningar för effektiv rengöring, desinfektion och sterilisation inom vård- och biovetenskapssektorerna. Vi fokuserar på att hjälpa våra kunder att erbjuda bättre vård till en lägre kostnad, genom att erbjuda genomtänkta och skräddarsydda lösningar. Det innebär att vi finns med våra kunder hela vägen från planering och utbildning till spårbarhet och support – med kompletta lösningar, långsiktigt engagemang och global närvaro. Getinge – Always with you.

Getinge Skärhamn

Industrivägen 5
471 31 Skärhamn
Tel: +46 304 60 02 00
Fax: +46 304 60 02 29
info@seska.getinge.com
www.skarhamn.getinge.com

GETINGE
GETINGE GROUP

www.getinge.com

GETINGE GROUP är en ledande global leverantör av produkter och system som bidrar till kvalitetsförbättring och kostnadseffektivitet inom vård, omsorg och forskning. Vi är verksamma under de tre varumärkena ArjoHuntleigh, GETINGE och MAQUET. **ArjoHuntleigh** fokuserar på lösningar för patienters mobilitet och sårvård. **GETINGE** tillhandahåller lösningar för infektionskontroll inom hälso- och sjukvård samt kontamineringsförebyggande verksamhet inom bioteknik. **MAQUET** är specialiserat på lösningar, behandlingar och produkter för kirurgi och intensivvård.